

NF 048

Mikrolitre & Hematokrit Santrifüj



- İki farklı rotor seçeneği ile geniş uygulama alanı:
 - Kılcal (kapiller) tüplerdeki kan örneklerinin santrifüjü sonucunda hematokrit seviyesinin ölçülmesini sağlayan hematokrit rotor
 - Genetik ve moleküler biyoloji, biyokimya ve farklı alanlarda birçok uygulama için kullanılabilen 24x1,5/2 ml açılı mikrolitre rotor ve 250/400/500/700/800µl ve 200µl PCR tüpleri için adaptörler
- Programlanabilir mikroişlemcili N-Prime™ kontrol sistemi
- Çevir bas butonu sayesinde kolay programlayabilme
- RPM/RCF ve zaman için iki geniş LED gösterge
- RPM veya RCF değeri ile program yapabilme özelliği
- Kısa santrifüj işlemleri için "PULSE" seçeneği
- Kapaktaki hava kanalından sürekli havalandırma sayesinde azaltılan hazne içi sıcaklık artışı
- Sessiz ve bakım gerektirmeyen indüksiyon motor
- Elektrostatik toz boyalı çelikten imal edilmiş gövde, kapak ve hazne
- Kapak kilit sistemi ve motor aşırı ısınma koruması ile ilave güvenlik
- Hız ölçümü için gözetleme penceresi

TEKNİK ÖZELLİKLER


	NF 048	
ROTORLAR	Mikrolitre Açılı Rotor	Hematokrit Rotor
Maksimum Hız	14.000 rpm	12.000 rpm
Maksimum RCF	18.188xg	14.811xg
Tüp Kapasitesi	24 x 1,5/2 ml	24 x kapiller tüp
Kontrol Sistemi	Programlanabilir mikroişlemcili N-Prime™	
Gösterge	Hız/RCF ve zamanlayıcı için dijital göstergeler	
Hız Ayar Aralığı	1.000-14.000 rpm	
Hız Ayar Kademesi	10 rpm	
Zamanlayıcı Ayar Aralığı	1-99 dakika / süresiz	
Zamanlayıcı Ayar Kademesi	1 dakika	
Motor	Bakım gerektirmeyen indüksiyon motor	
Gövde, Kapak ve Hazne	Elektrostatik toz boyalı çelik	
Kurulu Güç	450 W	
Çalışma Voltajı	230 V - 50 Hz	
Dış Ölçüler (GxDxY) mm	285x375x245	
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm	350x420x480	
Net / Paketli Ağırlık, kg	13/17	

ROTORLAR

Kod	Rotor Tipi	Kapasite	Maksimum Tüp Çapı (mm)	Yarıçap (mm)	Mak Hız (rpm)	Mak RCF (xg)
B 50 019	Açılı	24 x 1,5/2 ml	11	83	14.000 rpm	18.188
B 50 020	Hematokrit	24 x Kapiller Tüp	1,6	92	12.000 rpm	14.811

AÇILI ROTOR İÇİN ADAPTÖRLER

Kod	Tüp Tipi	Maksimum Tüp Çapı (mm)
A 14 005	500/800 µL	8
A 14 006	200 µL PCR	6,5
A 14 007	250/400/700 µL	6

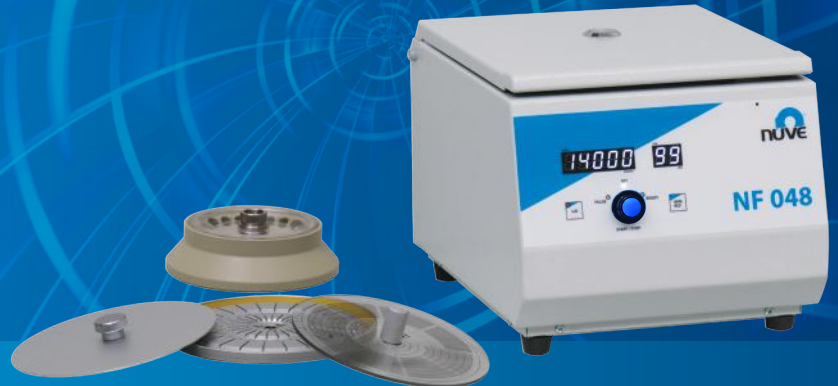

NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TÜRKİYE t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97
nuve.com.tr satis@nuve.com.tr

ISO 9001: 2015
ISO 13485: 2016
ISO 45001: 2018

