



GÜÇLÜ VE GÜVENLİ R KONTROL SİSTEMİ

- Programlanabilir mikroi lemci NSmart™ kontrol sistemi
- Yüksek çözünürlükte 4,3" renkli TFT LCD ekran ile çalın parametrelerin kolay takibi
- Dört adet fonksiyon tuşu ile çok yönlü ve kolay kullanım
- 4 haneli ifre korumalı menü ile güvence altına alınmış çalınma
- Standart sunulan 5 dil seçeneği
- Sıcaklıklarının grafik ve sayı tabloları saklanmasını sağlayan izlenebilirlik
- Herhangi bir alarm durumunda kırmızı renge dönerek kullanıcıyı uyararak ekran
- Servis işlemlerini kolaylaştıran arıza tespit sistemi
- Olunabilecek hataların neden ve çözümlerini açıklayan yardım menüsü
- Ekran parlaklığını azaltarak enerji tasarrufu sağlayan ışık koruyucu (1300 dk.)
- Yapılan çalınmalar onayladıkça grafik olarak saklayabildiğimiz hafıza
- Servis işlemlerini kolaylaştırmak için hafızada tutulan alarm ve hata geçmişi
- Yazılım güncellemeleri, kalibrasyon ve teknik parametre ayarları için ifre korumalı servis menüsü
- Cihazda son 50 hataya ait verilerin ekran üzerinden takibi

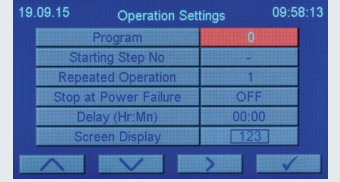

| Time | Temperature | Time | Temperature |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 00:00 | 0.1 | 01:00 | 0.1 |
| 02:00 | 0.0 | 03:00 | 0.1 |
| 04:00 | 0.1 | 05:00 | 0.1 |
| 06:00 | 0.0 | 07:00 | 0.0 |

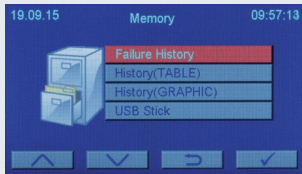

| Failure Name | Date | Time |
|--------------|------------|----------|
| Err6 | 18.09.2015 | 18:05:41 |
| Err5 | 18.09.2015 | 17:57:25 |
| Err6 | 18.09.2015 | 17:23:41 |
| Err6 | 18.09.2015 | 17:23:38 |
| Err6 | 18.09.2015 | 17:23:35 |

OPSİYONEL NSmart™ HABERLEŞİM TESLİ TAM İZLENEBİLİRLİK VE GÜVENLİK

- Çalınma verilerinin USB port üzerinden harici belleğe kaydedilebilmesi
- Kayıt aralığını 10, 30 saniye, 1, 5, 30 ve 60 dakika olarak seçilebilmesi
- İnternet bağlantısı için Ethernet portu
- Opsiyonel Nüve Closer™ yazılım ile internet üzerinden cihaz uzaktan erişim sağlayarak hafızadaki tüm verilere ulaşılabilmesi
- Ethernet çukulu ile hata ve arızalar hakkında detaylı bilgi içeren 5 farklı adrese e-posta gönderebilmesi
- Opsiyonel AlerText™ GSM alarm modülü sayesinde hata ve arızada durumunda 5 farklı telefon numarasına kısa mesaj gönderimi ile hızlı müdahale sağlayabilmesi
- N-Mobile™ telefon uygulaması için opsiyonel WiFi bağlantısı



| | |
|------------------------------------|--|
| Tank Hacmi, litre | 29 |
| Faydalı Hacim, litre | 17 |
| Faydalı Su Yüksekliği | 170 mm |
| Sirkülasyon Pompası Kapasitesi | 16 lt / dakika |
| Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı | 0°C / 80°C |
| Sıcaklık Sensörü | Pt-100 |
| Kontrol Sistemi | Programlanabilir PID mikroişlemcili N-Smart™ kontrol sistemi |
| Gösterge | 4,3" renkli LCD TFT ekran |
| Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 0,1°C |
| Sıcaklık Dağılımı (+37°C'de) | ± 0,1°C* |
| Sıcaklık Dalgalanması (+37°C'de) | ± 0,1°C* |
| Programlanabilir Alarm Limitleri | ± 1°C / 10°C |
| Program Hafızası | 20 |
| Program Basamak Adedi | 20 |
| Program Tekrar Adedi | 1-99 |
| Zamanlayıcı | 1 dakika - 100 saat / süresiz |
| Program Erteleme | 1 dakika - 100 saat |
| Alarm | Sesli ve görsel |
| Yalıtım | Yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş poliüretan |
| İç Yüzey Yapısı | Paslanmaz çelik |
| Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı paslanmaz çelik sac |
| Kurulu Güç | 2000 W |
| Çalışma Voltajı | 230 V - 50 Hz |
| İç Ölçüler (GxDxY) mm | 300x505x195 |
| Dış Ölçüler (GxDxY) mm | 340x630x608 |
| Paket Ölçüleri (GxDxY) mm | 430x690x680 |
| Net/Paketli Ağırlık, kg | 37 / 43 |

*22°C ortam sıcaklığında kapak kapalıyken

FABRİKA MONTAJLI OPSİYONLAR

| | |
|-----------|--|
| BS XXX S | Harici sirkülasyon sistemi |
| BS XXX WF | N-Mobile™ telefon uygulaması için Wi-Fi bağlantısı |

OPSİYONLAR

| | |
|----------|---|
| A 08 190 | N-Smart™ haberleşme ünitesi (USB1-Data kaydı, USB2-PC, Ethernet, RS kullanımı) |
| A 08 191 | AlerText™ GSM alarm modülü (Sim kart dahil değildir) (Haberleşme ünitesi takılı olmayan cihazlarda kullanılmaz) |
| A 08 195 | NüveCloser™ Yazılımı (Haberleşme ünitesi takılı olmayan cihazlarda kullanılmaz) |
| A 08 231 | NüveCloser™ Multi yazılımı (Haberleşme ünitesi takılı olmayan cihazlarda kullanılmaz) |

AKSESUARLAR

| | |
|------------|--|
| K 04 289 | Pleksiglas kapak (60°C'ye kadar dayanır) |
| K 52 019 | Paslanmaz çelik kapak |
| K 52 005 4 | 4 delikli kapak (Delik Çapı 95 mm) |
| K 52 006 6 | 6 delikli kapak (Delik Çapı 95 mm) |
| K 52 014 8 | 8 delikli kapak (Delik Çapı 95 mm) |

| | |
|----------|--|
| A 08 051 | Tüp taşıyıcı 52xØ13 mm (genişlik 70 mm) |
| A 08 050 | Tüp taşıyıcı 30xØ16 mm (genişlik 70 mm) |
| A 08 021 | Tüp taşıyıcı 27xØ18 mm (genişlik 70 mm) |
| A 08 049 | Tüp taşıyıcı 12xØ30 mm. (genişlik 70 mm) |

| | |
|----------|-----------------------------|
| O 03 240 | 12x100 ml flasklar için raf |
| O 03 239 | 6x250 ml flasklar için raf |
| O 03 237 | 4x500 ml flasklar için raf |
| O 03 238 | 2x1000 ml flasklar için raf |



NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TÜRKİYE t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97
nuve.com.tr satis@nuve.com.tr

ISO 9001: 2015
ISO 13485: 2016

