



KN SERİSİ

Kan Saklama Dolapları



N-s2art



KN Serisi Kan Saklama Dolapları, N-Smart™ kontrol sisteminin sağladığı en yüksek güvenlik ve izlenebilirlik özellikleri ile tam kan ve kan ürünlerinin saklanması için tasarlanmıştır.

FONKSİYONEL VE SAĞLAM YAPI

- Kolay temizlenebilen paslanmaz çelik hücre
- Elektrostatik toz boyalı paslanmaz çelik gövde
- Kan torbalarının kolay görünmesini sağlayan ve mükemmel yalıtım sağlayan üç kat camdan oluşan kapı penceresi
- Kapı penceresinde yoğuşmayı engelleyen iç cam ve UV ışınlarını engelleyen dış cam
- Sızdırmazlık ve yalıtım sağlayan manyetik kapı contası
- Titreşimsiz çalışma

ERGONOMİK TASARIM

- Uygun hava dolaşımı için delikli paslanmaz çelik raflar
- Kolay hareket ettirilebilen tekerlekli raf sistemi
- Sıcak hava girişini engelleyen raf önünde şeffaf pleksiglas koruyucu
- Kan torbalarını açılı pozisyonda tutarak etiketlerin kolay okunmasını sağlayan pleksiglas ayırıcılar
- Buton kontrollü hücre içi aydınlatma
- Standart olarak sunulan sıcaklık kontrol ve kalibrasyon portu

MÜKEMMEL SICAKLIK KONTROLÜ

- Güçlü hava dolaşımı sistemi sayesinde tüm raf seviyelerinde mükemmel sıcaklık dağılımı ve kararlılığı
- Yönlendirilen hava akışı sayesinde kapı açılıp kapandıktan sonra çok hızlı sıcaklık toparlanması
- Soğutma verimliliğini koruyan tam otomatik defrost sistemi
- Saklanan kanın gerçek sıcaklığını kontrol ve gösterim için kan ile benzer özelliklere sahip sıvıdan sıcaklık kontrolü
- Yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş poliüretan yalıtım ile yüksek verim




GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR KONTROL SİSTEMİ: N-Smart™

- Yüksek çözünürlükte 4,3" renkli TFT LCD ekran ile çalışan parametrelerin kolay takibi
- Dört adet fonksiyon tuşu ile çok yönlü ve kolay kullanım
- Şifre korumalı menü ile güvence altına alınan çalışma ve hafıza verileri
- İşlemleri kolaylaştıran ikonlar
- Standart sunulan 5 dil seçeneği
- Ekran koruyucu (1 - 300 dakika)

TAM İZLENEBİLİRLİK VE UZAK ERİŞİM

- Sıcaklık verilerinin zamana karşı sayısal ve grafik olarak takibi
- Bir saatlik aralıklarla yapılan sıcaklık ölçümlerini sayısal ve grafik olarak 10 yıla kadar saklayabilen geniş hafıza
- USB port üzerinden kullanılacak harici bellek yardımıyla 10 ya da 30 saniye veya 1-5-30-60 dakikalık periyotlarla kayıt alabilme imkânı
- Bilgisayar bağlantısı için USB portu
- Ethernet portu ve opsiyonel NüveCloser™ yazılımı ile internet üzerinden uzak erişim özelliği
- Opsiyonel NüveCloser™ yazılımı ile uzaktan arıza tespiti
- Opsiyonel NüveCloser™ Multi yazılım ile 15 farklı cihazı takip edebilme
- NüveCloser™ yazılımı ile uzaktan çalışan parametrelere, hafızadaki verilere, hata geçmişine diğer teknik verilere ulaşma imkanı
- Pille çalışan ve yüksek hassasiyetli opsiyonel haftalık dairesel sıcaklık kaydedicisi
- N-Mobile™ telefon uygulaması için standart Wi-Fi bağlantısı
- N-Smart™ haberleşme ünitesi ile;
 - 1.USB port ile veri transferi ve yazılım güncelleme
 - 2.USB port ile bilgisayar bağlantısıEthernet port ile bilgisayar bağlantısı ve hatalarda 5 farklı e posta adresine e-posta gönderimi

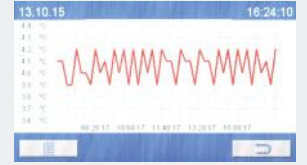

Saat	Sıcaklık	Saat	Sıcaklık
00:00	4.0	01:00	4.0
02:00	4.0	03:00	4.0
04:00	4.0	05:00	4.0
06:00	4.0	07:00	4.0



DEĞERLİ NUMUNELER İÇİN AZAMI GÜVENLİK

- 4 haneli şifre ile menü erişimi
- Yetkisiz kullanımı engelleyen kilitlenebilir kapı
- Kilitli güç anahtarı
- Yüksek ve düşük sıcaklık, elektrik kesintisi, sıcaklık sensörü arızası ve açık kapı için alarm sistemi
- Herhangi bir alarm durumunda kırmızı renge dönerek sesli alarmla birlikte kullanıcıyı uyarın ekran
- Alarm sistemini besleyen ve otomatik olarak şarj olan pil
- Elektrik kesintisinde dahi gerçek hücre sıcaklığının gösterimi
- Cihazda son 50 hataya ait verilerin ekran üzerinden takibi
- Ethernet çıkışı ile hata ve arıza durumlarında detaylı bilgi içeren 5 farklı adrese e-posta gönderebilme
- Standart olarak sunulan uzak ve merkezi alarm çıkışları
- Opsiyonel AlerText™ GSM alarm modülü sayesinde hata ve arıza durumunda 5 farklı telefon numarasına kısa mesaj gönderimi ile hızlı müdahale sağlayabilme
- Opsiyonel NüveWarn™ uzak alarm sistemi



TEKNİK ÖZELLİKLER

	KN 120	KN 294
Nominal Kapasite* (450 ml Kan Torbası), adet	120	294
Brüt Hücre Hacmi, litre	304	632
Net Hücre Hacmi, litre	269	568
Çekmece Sayısı, adet	5	6
Çekmece Kapasitesi (adet)	24	49
Kontrol Sistemi	Programlanabilir mikroişlemcili N-Smart™	
Dahili Hafıza	10 yıl	
Emniyet Sistemi	Kilitlenebilir aç-kapa anahtarı	
Sıcaklık Göstergesi	4,3" Renkli LCD ekran (Elektrik kesintilerinden etkilenmez)	
Sıcaklık Çalışma Ayar Aralığı	0°C / 10°C	
Sıcaklık Okuma ve Ayar Hassasiyeti	0,1°C	
Sıcaklık Sensörü	1 adet Pt-100	
Sıcaklık Dağılımı (+4°C'de)	±1°C	
Sıcaklık Kontrolü	Kan özelliğindeki sıvıdan ölçüm	
Sıcaklık Alarmı	Ayar sıcaklığı ±2°C (Sesli ve görsel)	
Güç Kesintisi ve Kapı Alarmı	Sesli ve görsel	
Alarm Besleme	Otomatik olarak şarj olan 12 saatlik akü	
Kapı Yapısı	İzolasyonlu çelik çerçevesi, üç katlı cam pencereli ve kilitlenebilir	
Çekmece Yapısı	Hareketli ve çıkarılabilir paslanmaz çelik	
Gürültü Seviyesi	< 60 dB	
İzolasyon (CFC içermez)	Yüksek yoğunlukta enjekte edilmiş poliüretan	
Conta Yapısı	Manyetik conta	
Soğutucu Gaz (CFC içermez)	R 134a	
Kalibrasyon Kanalı	Ø25 mm yan duvarda sensör girişi	
İç Aydınlatma (Floresan)	18 W	30 W
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz çelik	
Dış Yüzey Yapısı ve Kalitesi	Elektrostatik toz boyalı paslanmaz çelik	
Tekerlek Sistemi	2'si kilitlenebilir 4 adet tekerlek, 2 adet sabitleme ayağı	
Kurulu Güç	330 W	1000 W
Çalışma Voltajı	230 V - 50 Hz	
Hücre Ölçüleri (GxDxY) mm	478x545x1168	738x635x1348
İç Ölçüler (GxDxY) mm	478x545x1033	738x635x1213
Dış Ölçüler (GxDxY) mm	610x805x1855	917x895x1985
Paket Ölçüleri (GxDxY) mm	700x860x2040	1030x1020x2140
Net/Paketli Ağırlık, kg	180 / 205	275 / 305

FABRİKA MONTAJLI OPSİYONLAR

KN XXX Y Haftalık dairesel sıcaklık kaydedici

OPSİYONEL İSTEKLER

- A 08 070 Kaydedici kalem ucu
A 08 073 Kaydedici kağıt (100 adet)
A 08 191 AlerText™ GSM alarm modülü (Sim kart dahil değildir)
A 08 195 NüveCloser™ Yazılımı
A 08 231 NüveCloser™ Multi yazılımı
K 13 009 NüveWarn™ Uzak alarm sistemi (10 m. kablo ile birlikte)

NOT: A 08 191 ve A 08 195 birlikte kullanılamaz.



NUVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah. Saracalar Kümeevleri No: 4/2 Akyurt 06750 ANKARA / TÜRKİYE t. +90 312 399 28 30 f. +90 312 399 21 97
nuve.com.tr satis@nuve.com.tr

ISO 9001: 2015
ISO 13485: 2016
ISO 45001: 2018

